


Antygenowe szybkie auto-testy dla uczniów

Obracasz patyczek z wacikiem we własnym nosie – nie głębiej niż 2 cm!
Krótko i bezbólowo! Wynik za 15 minut!

Co jest potrzebne?



Karta testowa

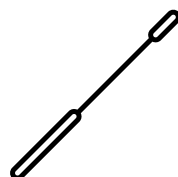



Patyczek z wacikiem



Roztwór




Jak to działa?

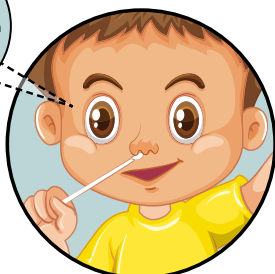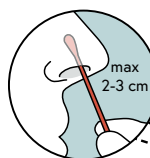


Krok 1:

- Ввести палочку во Влóż patyczek TYLKO na głębokość 2 cm do dziurki nosa
- Obracaj patyczek 5 razy
- Teraz włóż ten sam patyczek do drugiej dziurki nosa i ponownie obracaj 5 razy

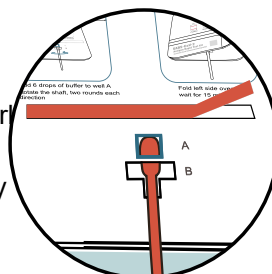


Krok 2:

- Usuń osłonę ochronną z paska klejącego i wsuń patyczek do otworu.

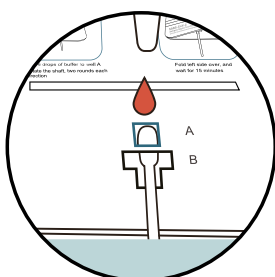

Krok 3:

- Dodaj 6 kropli płynu do zagłębienia i obróć patyczek z wacikiem 2 razy w lewo i 2 razy w prawo

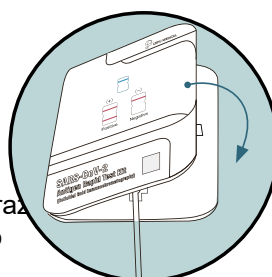

Krok 4:

- Sklej kartę testową
- Wynik testu pojawi się po 15 minutach



Krok 5:

- Wynik testu dodatni: w domu: trzeba zadzwonić pod numer telefonu 1450 w szkole: dyrekcja szkoły dzwoni pod numer telefonu 1450 lub kontaktuje miejscowy urząd sanitarny
- Wynik testu ujemny: Uważaj na zdrowie i dalej chodź do szkoły